

# CHRONOTECH

## CHRONOMÈTRE ÉLECTRONIQUE




### SPÉCIFICATIONS

Le CHRONOTECH simplifie les opérations requises lors de la mesure visuelle de la viscosité. Il permet de calculer automatiquement la viscosité cinématique en entrant la constante du tube. Mobile et facile à manipuler, trois mesures différentes peuvent être effectuées simultanément avec le CHRONOTECH.

\*Photos non contractuelles - Elles peuvent différer du produit réel.

## CARACTÉRISTIQUES

- Mobile
- Facile d'utilisation (repère de position)
- 3 tests simultanés
- Interface à écran tactile
- 3 heures d'autonomie
- Indicateur de batterie restante
- Garde en mémoire les constantes

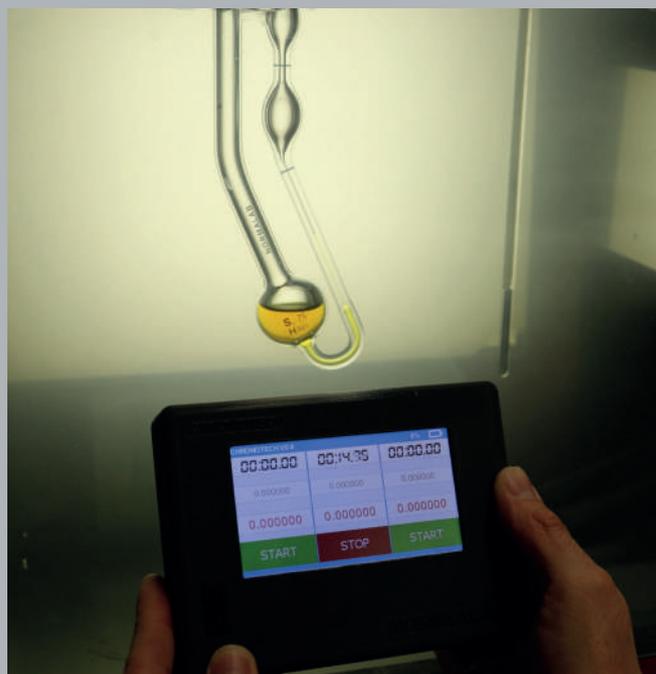

## CONDITIONS DE LIVRAISON

### Production NORMALAB - CHRONOTECH - Chronomètre

41900

#### Détails de la livraison :

Le CHRONOTECH est livré avec :

- 1 source d'alimentation
- 1 support de chargement
- 1 adaptateur

#### Conditions requise pour l'installation :

- Alimentation électrique : 100-240 V - 50/60 Hz - 1 A
- Dimensions : (W) 150 x (D) 45 x (H) 115 mm
- Poids : 500 g

 **NORMALAB**  
www.normalab.com

#### CONTACT :

[vente@normalab.com](mailto:vente@normalab.com) (France)  
[sales@normalab.com](mailto:sales@normalab.com) (hors France)

Normalab FRANCE SAS  
ZA Caux Multipôles 1 - 76190 Valliquerville  
Tel. : +33 232.700.100  
Fax : +33 232.704.732

DISTRIBUÉ PAR