


FIA CLASSIC

DÉTERMINATION DES GROUPES D'HYDROCARBURES MÉTHODE PAR ADSORPTION EN PRÉSENCE D'INDICATEURS FLUORESCENTS

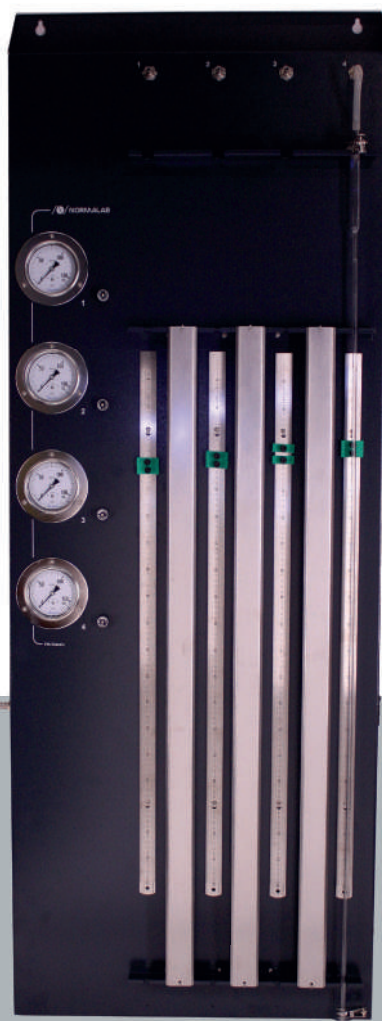

NORME

ASTM D 1319, ISO 3837, IP 156, DIN 51791 et méthodes associées.

DOMAINE D'APPLICATION

Cette méthode d'essai couvre la détermination des types d'hydrocarbures sur des plages de concentration allant de 5 à 99% en volume d'aromatiques, de 0,3 à 55% en volume d'oléfinés et de 1 à 95% en volume de saturés dans les fractions de pétrole qui distillent en dessous de 315 ° C.

SPECIFICATIONS


L'essai caractérise la qualité des fractions pétrolières en tant que composants de mélange d'essence et en tant qu'aliments pour les processus de reformage catalytique. Ces informations sont également importantes pour caractériser les fractions et produits pétroliers issus du reformage catalytique et du craquage thermique et catalytique en tant que composants de mélange pour les carburants pour moteurs et aviation.

Principales caractéristiques

- Ensemble d'accessoires inclus
- Colonne à choisir de 1 à 4
- Lampes UV intégrées
- Colonnes de précision ou standard au choix

Accessoires fournis

- Joints inférieurs
- Joints supérieurs
- Pincettes pour connecteur sphérique

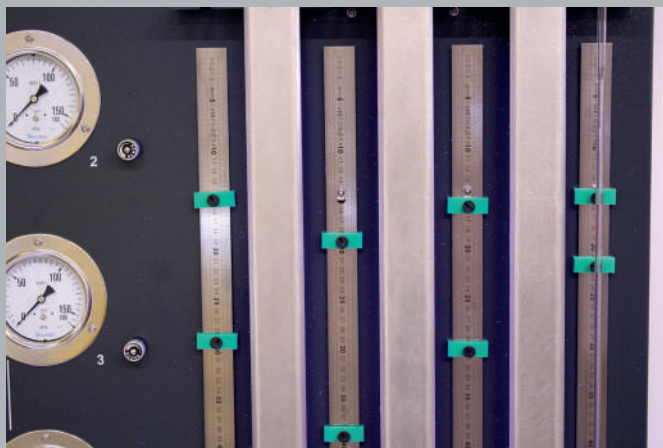

CONDITIONS DE LIVRAISON

941600

Détail de la livraison :

FIA Classic est livré avec :

- 4 réglettes graduées avec index
- 4 soupapes à pointe pour arrivée d'air
- 4 manomètres (1 par verrerie)
- 1 vibreur électrique.
- 1 set d'accessoires

Conditions requises pour l'installation :

- Alimentation électrique : 230 V - 50/60 Hz - 1 A
- Dimensions : (L) 700 x (P) 160 x (H) 1900 mm
- Poids : 35 kg

** Alimentation en air comprimé: 125 Kpa Max
Réactifs sur demande*

 **NORMALAB**
www.normalab.com

CONTACT :

vente@normalab.com (France)
sales@normalab.com (Export)

NORMALAB France SAS
76190 Valliquerville - FRANCE
Tel. : +33 232.700.100
Fax : +33 232.704.732

DISTRIBUÉ PAR