

# TOST CLASSIC

## CARACTÉRISTIQUES D'OXYDATION



### **NORMES**

ASTM D 943, D 2274, D 2893, D 4310, IP 157, IP 388, ISO 4263-1,2,3, ISO 12205 et méthodes associées.

### **DOMAINE D'APPLICATION**

Ces méthodes permettent d'évaluer le comportement lors du vieillissement des huiles minérales contenant des additifs antioxydants et antirouille dont la masse volumique est inférieure à celle de l'eau, et utilisées comme huiles pour turbines, comme fluides hydrauliques, et comme huiles de graissage par circulation.

L'utilisateur a la possibilité de choisir les accessoires qui correspondent aux méthodes requises en fonction de ses besoins, afin d'avoir un appareil personnalisé.


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Principales caractéristiques

- Jusqu'à 8 positions
- Capacité du bain : 30 litres
- Température du bain : de l'ambient à 125°C
- Affichage digital de la température
- Débitmètre et verrerie sur demande

### Accessoires

- REF 9416251 - Débitmètre 3 l/h air pour ASTM D 943, IP 157, ISO 4263
- REF 9416252 - Débitmètre 3 l/h oxygène pour ASTM D 2274 & D 4310, ISO 12205
- REF 9416253 - Débitmètre pour 10 l/h air pour ASTM D 2893
- REF 21696 - Cellule d'oxydation complète pour ASTM D 943, IP 157, ISO 4263 et ASTM D 2893
- REF 21697 - Cellule d'oxydation complète pour ASTM D 2274 & D 4310, ISO 12205

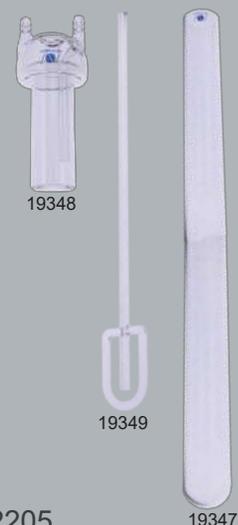

## LIVRAISON

9416260

### Détails de la livraison :

Le **TOST Classic** est livré avec :

- 1 thermomètre ASTM 40 C\* (Réf 11522)

*Sans débitmètre, ni verrerie*

*\* Sans certificat, étalonnage sur demande, thermomètre digital disponible sur demande*

### Pré-requis :

- Alimentation électrique : 230 V - 50 Hz - 16 A
- Dimensions : (L) 610 x (P) 450 x (H) 1100 mm
- Poids : 40 kg
- **Pression du gaz (bar):** 0,5 bars max d'air comprimé ou d'oxygène (selon la méthode ASTM)
- **Fluide:** 30L Huile silicone

### CONTACT :

[vente@normalab.com](mailto:vente@normalab.com) (France)  
[sales@normalab.com](mailto:sales@normalab.com) (Export)

Normalab FRANCE SAS  
175, rue Claudie HAIGNERE  
76190, Valliquerville  
Tel. : +33 232.700.100  
Fax : +33 232.704.732

DISTRIBUÉ PAR